

Wurf/Fall-Zubehör für Wurfgerät

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.conatex.com vom 03.07.2024/DE1

Bestellnummer: 1041611



PASCO



zum Artikel im
Webshop

229,00 € zzgl. MwSt.


Mit diesem Zubehör kann die Unabhängigkeit zwischen der horizontalen und vertikalen Bewegung eines Projektils demonstriert werden.

Das Gerät wird vor die Mündung des Wurfgerätes gesetzt. An einen Magneten wird eine Stahlkugel gehängt. Die abgefeuerte Kugel trifft die hängende Kugel, so dass eine Kugel im selben Moment horizontal weiter fliegt, während die andere Kugel gerade nach unten fällt. Beide Bälle schlagen gleichzeitig auf den Boden auf, unabhängig von der Mündungsgeschwindigkeit des abgefeuerten Geschosses, vorausgesetzt, das Wurfgerät ist horizontal ausgerichtet.

Lieferumfang:

1 Halterung, 2 massive Stahlkugeln 25 mm, 1 hohle Stahlkugel 25 mm, Ladestab

Erforderliches Zubehör

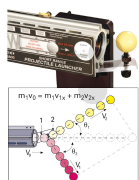

Wurfgerät (Reichweite 1,2 - 3 - 5 m)

Bestellnummer 1041480

697,00 € zzgl. MwSt.

CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH · Experimentiergeräte für Naturwissenschaft und Technik
Zentrales Handelsregister Saarbrücken HRB-Nr. 91619 · Geschäftsführer: Christoph Wolfsperger · www.conatex.com

SITZ IN DEUTSCHLAND
Zinzinger Str. 11 · D-66117 Saarbrücken
Fon +49 (0)6849 992 96 0
Fax +49 (0)6849 992 96 26
info@conatex.com · USt-ID: DE138038542

VERTRIEB ÖSTERREICH
Schwindgasse 4/7 · A-1040 Wien
Fon +43 (0)720 88 23 35
Fax +43 (0)720 88 23 36
austria@conatex.com

VERTRIEB SCHWEIZ
Aeschengraben 29 · CH-4051 Basel
Fon +41 (0)61 588 01 65
Fax +41 (0)61 588 01 75
schweiz@conatex.com

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER